

**PROCEDIMIENTOS** MÍNIMAMENTE INVASIVOS. **EFECTIVOS Y SEGUROS** 



### NUEVA TECNOLOGÍA. AHORRO DE TIEMPO. ALTA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE.





Clínicamente

validada



de pulsos





Procedimientos



Sin consumibles





# LÍDERES EN EXCELENCIA CLÍNICA







### ⊚ zaneocolombia | www.zaneolatam.com

Calle 93 No 14-71 oficina 301, Barrio Chico, Bogotá, Colombia Atención a clientes: +57 310 3364982



(II) INMODE

Inmodecolombia | www.inmodemd.com

The new



# CONTOURA

by INMODE



M®RPHEUS8 | FORMA PLUS BODY fx + minifx

Plataforma de remodelación mínimamente invasiva

TECNOLOGÍA RF/RFAL

# M@RPHEUS8| BODY fx | MINI fx | FORMA PLUS

# PROCEDIMIENTOS AVANZADOS DE REFINAMIENTO Y REMODELADO CON TECNOLOGÍA RF/RFAL

#### ¿QUÉ ES CONTOURA?

Contoura es la plataforma de remodelación facial mínima- Un campo térmico contenido garantiza un tratamiento mente invasiva y corporal no invasiva que ofrece la última controlado y seguro mediante la tecnología A.C.E.tecnología para tratamientos de grasa localizada, celulitis y (Adquirir, Controlar, Extiender). flacidez corporal, y tensado facial.

#### TECNOLOGÍA A.C.E.

# BODYfx + MINIfx

Los tratamientos **BODY** *fx* se dirigen a los tejidos grasos problemáticos para lograr un contorno corporal ideal.

- La radiofrecuencia proporciona un calentamiento preciso y óptimo de la piel para reducir, contraer y dar forma al
- > El masaje de presión negativa aplica una suave presión de vacío que permite la máxima profundidad de tratamiento.
- > Estudios clínicos con histologías muestran reducción y contracción de volumen.

El precalentamiento del tejido reduce el umbral de apoptosis selectiva de las células grasas.

El control sofisticado de la impedancia y la temperatura del tejido logra y mantiene los puntos finales de temperatura óptimos para evitar daños atróficos.



Monitoreo y control activo de temperatura con cortes para seguridad sin precedentes, eliminando virtualmente el riesgo de lesiones térmicas.

## FORMA PLUS

FORMA PLUS es un aplicador de calentamiento subcutáneo no invasivo para la remodelación del colágeno. La corriente de RF fluye uniformemente entre los electrodos para proporcionar una experiencia térmica confortable. Los controles de temperatura incorporados permiten alcanzar temperaturas óptimas clínicamente probadas y la capacidad exclusiva de exposición prolongada a temperaturas terapéuticas.

Adquirir: los termómetros de RF inteligentes integrados en la pieza de mano leen la temperatura de la piel 1000 veces por segundo, adquiriendo información crítica.

*Controlar*: seguridad y uniformidad sin precedentes con temperatura de "corte" programable, que enciende y apaga automáticamente la unidad.




Heat RF Energy

Extender: La evidencia clínica indica que la exposición prolongada a (41° C-43° C) es ventajosa para el tensado de la piel.


# MORPHEUS8

#### PORTAFOLIO DE PUNTAS MODULARES FRACCIONADAS

El diseño patentado único permite la distribución uniforme de la energía de RF a través de matrices bipolares de electrodos de microagujas y da como resultado un calentamiento y coagulación localizados del tejido que está en contacto directo con las agujas.

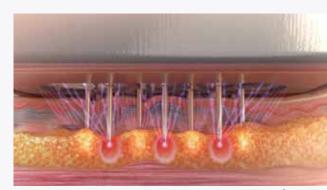

PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN

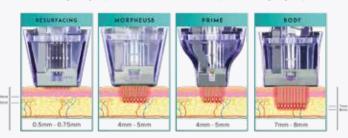

### PRIME

12 microagujas bañados en oro



Perfil de profundidad: 1mm - 4mmm

Perfil de profundidad adicional de 1mm


Profundidad de tratamiento computarizada

Aislado con punta conductora de 0.5mm

Remodelación subdérmica y dérmica de áreas pequeñas de difícil acceso como el área periorbital, la frente, la parte interna de los brazos y la delicada región femenina mediante coagulación fraccionada y calentamiento global subnecrótico.

### **MORPHEUS8**

24 microagujas bañados en oro

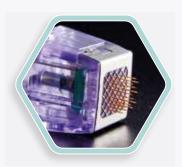

Perfil de profundidad: 1mm - 4mmm

Perfil de profundidad adicional de 1mm

Profundidad de tratamiento computarizada

Aislado con punta conductora de 0.5mm

Remodelación subdérmica y dérmica facial global subnecrótico.

# RESURFACING

24 microagujas bañados en oro



Perfil de profundidad: 0.5mm

Perfil de profundidad adicional de .25mm

Longitud fija

Aislado con punta conductora de 0.5mm

Remodelación epidérmica de la capa superficial



#### **BODY**

40 microagujas bañados en oro



Perfil de profundidad: 2mm - 7mmm

Perfil de profundidad adicional de 1mm

Profundidad de tratamiento computarizada

Aislado con punta conductora de 0.5mm

Remodelación subdérmica y dérmica corporal mediante coagulación fraccionada y calentamiento global subnecrótico.



